


2 A Teschio e denti, 1489.

RL 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e 'i vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.

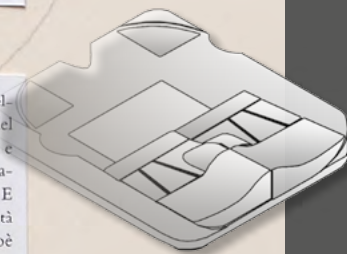

POSTURA PER PASSIONE DA OLTRE 20 ANNI

SOLUZIONI POSTURALI PER UTENTI CON LESIONE MIDOLLARE

SVILUPPATE INSIEME AI CLINICI ED AI PAZIENTI DELLE UNITÀ SPINALI PER:

RIDURRE IL RISCHIO DI UDP (ULCERE DA PRESSIONE)

NON OSTACOLARE IL CATETERISMO VESCICALE

PRESERVARE LE ENERGIE FISICHE E MENTALI GRAZIE AD UNA POSTURA STABILE ED ALLINEATA

SVOLGERE LE ADL (ACTIVITIES DAILY LIVING) IN PIENA SICUREZZA E MINIMIZZANDO GLI SFORZI

FAVORIRE I TRASFERIMENTI SICURI E STABILI DA E PER LA CARROZZINA

GARANTIRE UNA SUPERFICIE DI SEDUTA INDIVIDUALE E LEGGERA ANCHE IN PRESENZA DI MORFOLOGIE IRREGOLARI


PREVENIRE DOLORI DI ORIGINE POSTURALE E DEFORMITÀ

MASSIMIZZARE LA CAPACITÀ DI SPINTA DELLA CARROZZINA

UN MONDO DENTRO UN CUSCINO:

SCHIUME POLIMERICHE SELEZIONATE CON CURA....


KIT STRUTTURALE

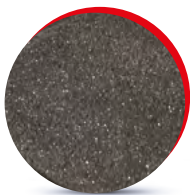

Polietilene combinato in differenti densità.

Assorbe le vibrazioni e risponde con lento ritorno di memoria alle deformazioni. Estremamente leggero, permette modifiche con cutter.

IMBOTTITURE

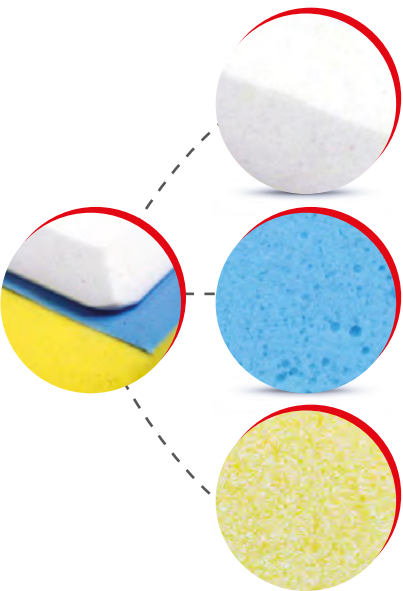

Schiuma poliuretanică espansa flessibile ed elastica che supporta il movimento
Permette il ricircolo dell'aria.

Schiuma poliuretanică viscoelastica flessibile a celle aperte
Antivibrante ed ammortizzante.

Schiuma poliuretanică antidecubito a ritorno lento di memoria.
Aiuta la distribuzione delle pressioni e si adatta alla morfologia.

...E COMBinate PER

ATTENUARE GLI URTI ED ASSORBIRE LE VIBRAZIONI

MINIMIZZARE LE FORZE DI TAGLIO

DISTRIBUIRE I CARICHI PRESSORI

RESTITUIRE COMFORT

ADERIRE ALLA MORFOLOGIA DELL'UTENTE SIA IN STATICA CHE IN DINAMICA
SENZA PERDERE LE PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE


Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.versainserito.com





PTS Pelvic Total Support

Perfetta aderenza all'anatomia del bacino e dei segmenti corporei ad esso correlati. Induce la risposta attiva del sistema muscolo scheletrico. La distribuzione dei carichi fornita dal PTS riduce lo stress meccanico nei tessuti profondi ed introduce benefici nella prevenzione delle Ulcere da decubito.

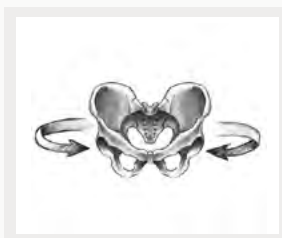

KIT STRUTTURALE PER CREARE LA FORMA E LA BASE STABILE

Personalizzazioni e modificazioni adattabili alle evoluzioni morfologiche dell'utente.



IMBOTTITURA FORME LIBERE


L'innovativa imbottitura modulare per immergersi nel massimo comfort con protezione sicura.

Kit imbottitura per distribuire i carichi in relazione al controllo posturale.



www.versainserito.com

VersaInserto
SEATING SOLUTIONS

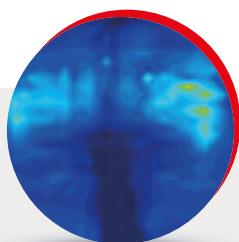

Risultati Test

La distribuzione delle pressioni oscilla in un intervallo compreso tra i 0,20 PSI e i 3,87 PSI (9,83 mmHg e 126,79 mmHg), i colori evidenziano la distribuzione dei picchi pressori sul cuscino. Dall'immagine si evince una completa aderenza ed elevata superficie di appoggio dell'anatomicità del bacino alla seduta (superficie in blu).

SOLUZIONI POSTURALI PER UTENTI CON LESIONE MIDOLLARE

- ✓ Utenti paraplegici

MODO
inserto
SPINE



KIT STRUTTURALE MODULARE E MODIFICABILE CON CONTENIMENTO PERIMETRALE PRESAGOMATO




KIT DI IMBOTTITURA **Forme Libere** PROTETTIVA ED AMMORTIZZANTE



COMODO E SICURO FODERA CON TASCA

PRATICO
inserto
SEAT

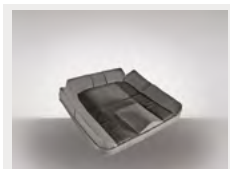

KIT STRUTTURALE MODULARE E MODIFICABILE A DENSITÀ DIFFERENZIATA



KIT DI IMBOTTITURA **Forme Libere**



STABILIZZANTE E MANEGGEVOLE

- ✓ Utenti Tetraplegici
- ✓ Utenti con esiti di recidive da UDP e chirurgia ricostruttiva
- ✓ Utenti Amputati o emipelvettomizzati
- ✓ Utenti con esiti di paraosteoartropatia (POA)

NOVO
inserto
SPINE



KIT STRUTTURALE MODULARE E MODIFICABILE A DENSITÀ DIFFERENZIATA



KIT DI IMBOTTITURA **Forme Libere** PROTETTIVA ED AMMORTIZZANTE



PERFETTA ADERENZA

- ✓ Utenti paraplegici e tetraplegici incompleti
- ✓ Utenti con esiti di infiammazioni articolari
- ✓ Utenti amputati
- ✓ Utenti con disallineamenti pelvico articolari

IMPULSO
inserto
SEAT



KIT STRUTTURALE MODULARE E MODIFICABILE A DENSITÀ DIFFERENZIATA



KIT DI IMBOTTITURA CONFORTEVOLE E PREVENTIVA



FACILITÀ LA PROPULSIONE A PIEDE

- ✓ Utenti Paraplegici e Tetraplegici
- ✓ Utenti in fase acuta
- ✓ Utenti con estrema necessità di controllo del tronco

TANTO
inserto
SEAT



KIT STRUTTURALE MODULARE E MODIFICABILE A DENSITÀ DIFFERENZIATA



KIT DI IMBOTTITURA **Forme Libere**



STRAORDINARIO CONTROLLO DEL TRONCO

Le indicazioni riportate hanno uno scopo informativo e non sostituiscono la completa analisi clinica, delle necessità dell'utente nella scelta del sistema di postura e della prescrizione, che rimane sempre e comunque a carico del prescrittore.

DAL BACINO AL TRONCO

Abilità, funzione e postura strettamente collegate, abbinate al massimo confort.




La postura del tronco inizia dal bacino. Dal P.T.S. (Pelvic Total Support) la naturale evoluzione T.T.S. (Trunk Total Support) Controllo latero-posteriore del tronco perfettamente adattabile.



TTS Trunk Total Support

Perfetta aderenza al rachide lungo tutti i suoi tratti, i suoi piani, ed i segmenti ad esso correlati, per garantire le performance funzionali e FORME ACCOLTE sempre. La distribuzione dei carichi d'appoggio fornita dal TTS è sinonimo di confort.

Intervento posturale combinato

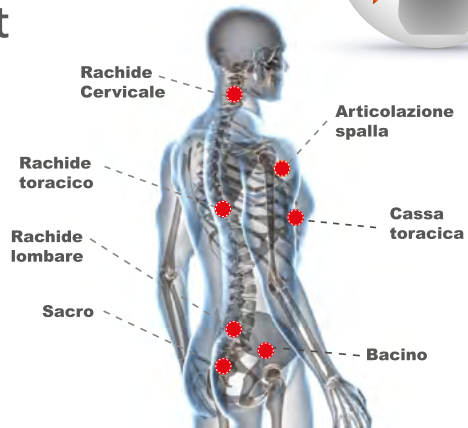

Le deformità del rachide sono molteplici e combinate P.T.S. e T.T.S insieme per risolvere.

✓ Utenti paraplegici e tetraplegici attivi



SCOCCA SAGOMATA SEMIRIGIDA CON AVVOLGENZA LATERALE



COMBINAZIONE DI SOFFICE IMBOTTITURA E SOSTEGNO SEMIRIGIDO=COMFORT GARANTITO



MULTI TENSIONABILE



KIT STRUTTURALE MODULARE E MODIFICABILE CON 6 INSERTI



COMBINAZIONE DI SOFFICE IMBOTTITURA E SOSTEGNO SEMIRIGIDO=COMFORT GARANTITO



MULTI TENSIONABILE

✓ Utenti paraplegici e tetraplegici mediamente attivi



MULTIREGOLABILE




8 INSERTI MODULARI MODIFICABILI




SUPPORTA L'ANATOMIA

✓ Utenti tetraplegici non attivi ed in fase acuta

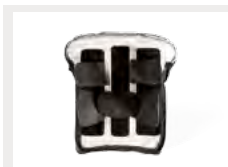

MULTIREGOLABILE

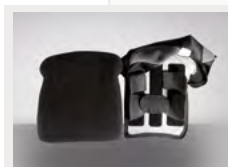

5 INSERTI MODULARI MODIFICABILI



ALLINEA IL TRONCO

Richiedi maggiori informazioni sulle soluzioni e
le pubblicazioni delle ricerche svolte all'indirizzo
info@promedicare.it

inserto[®]
S P I N E

PRODOTTO DA:



Risposte reali a bisogni speciali
ProMedicare[®]

Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Fax. +(39) 0831 730739
Email: sales@promedicare.it
www.versainserto.com
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485
N° 279412 / N° 279411



ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

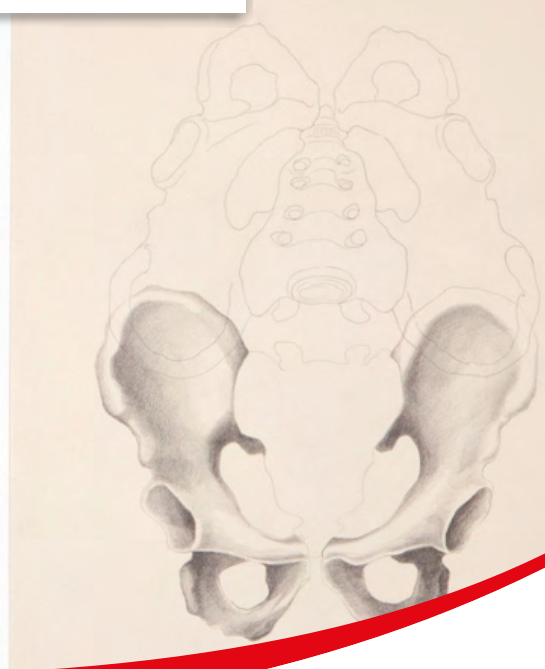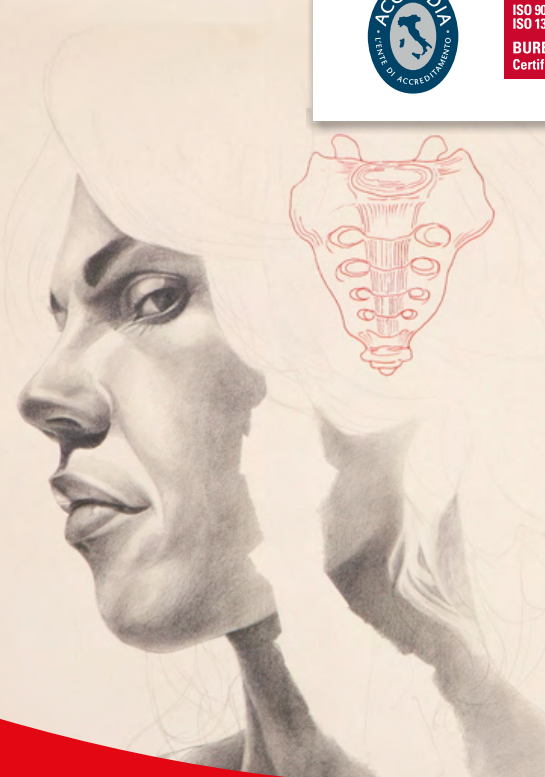

DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserto.com

Il produttore si riserva di apportare modifiche o sostituzione senza preavviso.
I contenuti, la forma, la creazione, l'ingegno, l'immagine, la strutturazione di questo catalogo, sono di proprietà della Pro Medicare srl.
Ogni utilizzo improprio e non autorizzato è vietato. Ogni imitazione e/o copia esplicita e non, potranno essere perseguite
Opere di copertina dell'artista Giuseppe Ciraci - www.giuseppeciraci.com - ogni riproduzione è vietata.