

Sistema di Postura INTEGRATO



-  **Manovrabile**
-  **Modificabile**
-  **Versatile**
-  **Leggera**
-  **Sicura**



*La soluzione ideale
per bambini ed adolescenti*



Materials

- **Base telaio modulare** in alluminio satinato, priva di saldature.
- **Schiena** con scocca in alluminio ad alta resistenza, Kit inserti in polietilene con proprietà ammortizzanti, imbottitura biaccoppiata in schiuma polimerica auto modellante e poliuretanic reticolata, rivestimento in tessuto microclimatico areato e traspirante elastico.
- **Cuscino** con base piatta e kit di inserti in polietilene con proprietà ammortizzanti, imbottitura performante Forme Libere con schiume differenziate antidecubito e viscoelastiche dalle prestazioni elevatissime e rivestimento new 3D, areato, incontinente, ignifugo e antibatterico.

Configurazione Standard:


- Base per postura basculante Adacta Liga Light rigida o chiudibile
- Unità posturale arti inferiori con pedane separate con poggiamambe fisso a 90° estraibile
- Unità posturale per il bacino modulare e **INSERTO SEAT BASICO**
- Unità posturale per il tronco modulare **INSERTO BACK EFFECTO LATO**
- Contenitori laterali al bacino
- Unità posturali per arto superiore
- Unità posturale per il capo Versa Capitis Confort
- Cinghia pelvica Versa Fixatis a 2 punti di fissaggio e 2 regolazioni e sgancio a pressione laterale
- Kit manici di spinta fissi
- Freno di stazionamento a leva
- Reclinazione a piastra c/perno predeterminata 3°, 9°, 15°, 22°
- Ruotina antiribaltamento fissa
- **Basculamento continuo** da 2° a 35° (da 6° a 39°) ①
- ① Basculamento maggiorato di 4° con aumento dell'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di posizionamento delle ruote anteriori nella forcella.
- Base sedile legno rivestita

Indicazioni Cliniche / Destinazione D'uso

Utenti **Bambini ed Adolescenti** affetti da insufficienza posturale bassa, media ed alta in esiti di varie patologie. **Titti** attraverso la combinazione della base **Adacta Liga Light** e del **cuscino e schienale Inserto** consente l'adattamento e/o la customizzazione secondo prescrizione in fase di **prova, consegna e monitoraggio post-consegna** per pazienti che presentano asimmetrie, colpi di vento, obliquità pelviche, retroversioni ed anteroversioni pelviche anche combinate tra loro e correlate scoliosi, lordosi e cifosi. **TITI** è destinata unicamente ad un utilizzo personale con la presenza di un accompagnatore sia in ambienti interni che esterni.

adacta^{light}
base per sistemi di postura

"UNA SCELTA DI SICUREZZA"

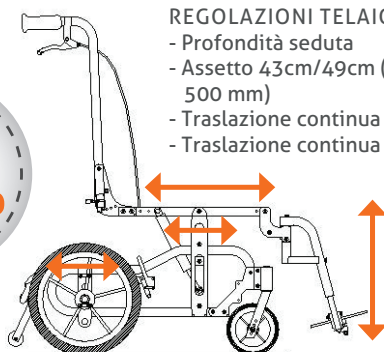

REGOLAZIONI TELAIO:

- Profondità seduta
- Assetto 43cm/49cm (con ruote da 300 mm e 500 mm)
- Traslazione continua piastra ruote posteriori
- Traslazione continua sovrastruttura

Guida Alla Scelta dell'allestimento Posturale

Intensità del sostegno posturale



Intensità del sostegno posturale



Parti Opzionali: (Con o senza sovrapprezzo. Pregasi consultare il modulo d'ordine)

- Ruote anteriori: 150 mm o 6" piene, 175 mm o 7" piene
- Ruote posteriori:
 - 300 mm o 12" (piene o pneumatiche, piene o pneumatiche con freno a tamburo, piene o pneumatiche con freno a tamburo + leva)
 - 400 mm o 16" (piene o piene con freno a tamburo con assetto a 45 cm)
 - 500 mm o 20" (piene o pneumatiche senza corrimano, pneumatiche con corrimano con freno a tamburo, pneumatiche con corrimano con freno a tamburo + leva)
 - 600 mm o 24" (pneumatiche con corrimano, non opzionabili su mis.US e se opzionate comportano una riduzione del basculamento a 20° con assetto a 47cm)
 - corrimano per ruote da 500 mm o 20"
- Angolo ginocchio 75° o elevabile
- Kit manici di spinta regolabili in altezza con perno
- Kit manici di spinta telescopici con blocchetto a leva
- Kit maniglione unico regolabile in inclinazione per rigida
- Kit maniglione unico regolabile in inclinazione e telescopico
- Quick-release per la regolazione facilitata della reclinazione dello schienale
- Kit maniglione regolabile in inclinazione per chiudibile
- Kit spondine
- Unità posturale per il bacino modulare Versa Inserto Seat Mediano o Domino
- Unità posturale per il tronco modulare Versa Inserto Back Supporto
- Ruotina antiribaltamento estraibile

Accessori:

- Bretellaggio a farfalla dinamico linea Versa Fixatis
- Tavolino linea Versa
- Poggipolpacci separati ribaltabili
- Divaricatore estraibile
- Fascia poggipolpacci imbottita
- Kit trasporto in auto (solo con ruote posteriori da 300 mm e 500 mm)
- Supporti toracici per schienale Versa Inserto Back EFFECTO LATO e SUPPORTO
- Pedalino per barriere architettoniche

Per l'elenco completo e dettagliato delle parti opzionali e/o accessori, fare riferimento all'ultima scheda d'ordine in vigore. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.promedicare.eu

Caratteristiche Tecniche

MISURA TITTI	PORTATA MASSIMA Misure espresse in kg	PESO TELAIO Misure espresse in kg	RAGGIO DI INVERSIONE (cm)	INGOMBRO MASSIMO IN LARGHEZZA / LUNGHEZZA Misure * espresse in cm							
				Ruote 300 Strd.	Ruote 300 Freno Tamb.	Ruote 400 Strd.	Ruote 400 Freno Tamb.	Ruote 500 Strd.	Ruote 500 Freno Tamb.	Ruote 600	
US	Rigido	50	14,1	69	48/96	49/96	50/99	53/99	50/101	53/101	/
	Chiudibile	50	14,9								
XXS	Rigido	50	14,4	69	53/96	54/96	55/99	58/99	55/101	58/101	55/104
	Chiudibile	50	15,3								
XS	Rigido	50	14,7	72	53/99	54/99	55/100	58/100	55/102	58/102	55/107
	Chiudibile	50	15,6								
XSO	Rigido	50	15,4	75	56/99	57/99	58/100	61/100	58/102	61/102	58/107
	Chiudibile	50	15,9								

Pendenza max 7°

NB.: Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard. *con angolo ginocchio in posizione 90° e pedana posizionata tutta in avanti

Peso telaio solo con ruote, angolo ginocchio e pedana come da configurazione standard. Il dispositivo per essere disassemblato non necessita di utensili. Può essere trasportato in aereo o in auto. Il dispositivo può essere utilizzato come sedile in autoveicolo, opportunamente allestito con sistemi di ancoraggio per trasporto di persone diversamente abili, se dotato di apposito kit per trasporto auto.

MISURA TITTI	INDICAZIONI UTENTE		REGOLAZIONE PROFONDITÀ TELAIO (cm)	MISURE CUSCINO (largh.x prof.) (cm)	MISURE SCHIENALE SUPPORTO (cm)				MISURE SCHIENALE EFFECTO (cm)			
	Largh. bacino (cm)	Prof. seduta (cm)			Schienale	Altezza	Largh. effettiva scocca	Largh. tronco	Schienale	Altezza	Largh. effettiva scocca	Larghezza tronco
US	20-30	28-38	da 36 a 44	30x38	3033	33	27	17-23	3033	33	30	c/staffa A 18-28 c/staffa B 13-23
XXS	26-36	28-38	da 36 a 44	36x38	3336	36	30	20-26	3338	38	33	c/staffa A 21-31 c/staffa B 16-26
XS	26-36	32-42	da 40 a 48	36x42	3640	40	33	23-29	3642	42	36	c/staffa A 24-34 c/staffa B 19-29
XSO	29-39	34-44	da 40 a 48	39x45	3944	44	36	26-34	3945	45	39	c/staffa A 27-37 c/staffa B 22-32

Peso e ingombri massimi del telaio con postura disaccoppiata, montanti (fissi) abbassati, poggiatesta e ruote disinseriti

MISURA TITTI		PESO TELAIO kg	INGOMBRI MASSIMI - misure espresse in cm		
			Larghezza	Lunghezza	Altezza
US	Rigido	11,4	42	66	65
	Chiudibile	12,2	30		
XXS	Rigido	11,7	48	66	65
	Chiudibile	12,6	30		
XS	Rigido	12	48	68	66
	Chiudibile	12,9	30		
XSO	Rigido	12,7	51	68	66
	Chiudibile	13,2	30		

Prodotto e Distribuito da:



Via Montagna Z.I. Lotto 41
72023 Mesagne (Br) - ITALY

Tel. +39 0831 777840 - Fax. +39 0831 730739

Sito web: www.promedicare.eu - Email: info@promedicare.it

C.at.Ver.Tit. Rev.6 05/2022

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001/ISO 13485



ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



www.promedicare.eu

Il produttore si riserva di apportare modifiche o sostituzioni senza preavviso. I contenuti, la forma, la creazione, l'ingegno, l'immagine, la strutturazione di questo catalogo, sono di proprietà della Pro Medicare srl. Ogni utilizzo improprio e non autorizzato è vietato. Ogni imitazione è copia esplicita e non, potranno essere perseguite.

CE Garanzia 2 Anni