

Sistema di Postura INTEGRATO



-  **Manovrabile**
-  **Modificabile**
-  **Versatile**
-  **Leggera**
-  **Sicura**



Comfort e Postura *Superiori*



Materiali

- **Base telaio modulare** in alluminio satinato, priva di saldature.
- **Schienale** con scocca in alluminio ad alta resistenza, Kit inserti in polietilene con proprietà ammortizzanti, imbottitura biaccoppiata in schiuma polimerica auto modellante e poliuretanic reticolata, rivestimento in tessuto microclimatico areato e traspirante elastico.
- **Cuscino** con base piatta e kit di inserti in polietilene con proprietà ammortizzanti, imbottitura performante Forme Libere con schiume differenziate antidecubito e viscoelastiche dalle prestazioni elevatissime e rivestimento new 3D, areato, incontinente, ignifugo e antibatterico.

Configurazione Standard:

- Base per postura basculante Adacta Liga Light rigida o chiudibile
- Unità posturale arti inferiori con pedane separate con poggiamambe fisso a 75°, ribaltabile ed estraibile
- Unità posturale per il tronco modulare INSERTO BACK SUPPORTO
- Unità posturale per il bacino modulare INSERTO SEAT BASICO
- Kit spondine con appoggi
- Unità posturale per il capo Versa Capitis Confort
- Cinghia pelvica Versa Fixatis a 2 punti di fissaggio e 2 regolazioni e sgancio a pressione laterale
- Freno di stazionamento a leva
- Kit manici di spinta fissi
- Reclinazione a piastra c/perno predeterminata 3°, 9°, 15°, 22°
- Ruotine antiribaltamento fisse
- **Basculamento continuo** a leva da 4° a 30° (da 8° a 34°)^①
- ① Basculamento maggiorato di 4° con aumento dell'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di posizionamento delle ruote anteriori nella forcella.
- Base sedile legno rivestita

N.B.: tutti i dispositivi standard sono stati inseriti nel repertorio dei dispositivi medici in accordo con la normativa vigente del Ministero della Salute (D.M. 20 Febbraio 2007 e 21 Dicembre 2009)
PER IL NUMERO DI REPERTORIO CONSULTARE LA SCHEDA D'ORDINE PRESENTE SUL NOSTRO SITO WEB


Indicazioni Cliniche / Destinazione D'uso

Utenti affetti da insufficienza posturale bassa, media ed alta in esiti di varie patologie.

Zeus attraverso la combinazione della base **Adacta Liga Light** e del cuscino e schienale **Inserito** consente la personalizzazione ed adattamento in fase di **prova, consegna e monitoraggio post-consegna** per pazienti che presentano asimmetrie, colpi di vento, obliquità pelviche, retroversioni ed anteroversioni pelviche anche combinate tra loro e correlate scoliosi, lordosi e cifosi. ZEUS è destinato unicamente con la presenza di un accompagnatore ad un utilizzo personale sia in ambienti interni che esterni.



"UNA SCELTA DI SICUREZZA"

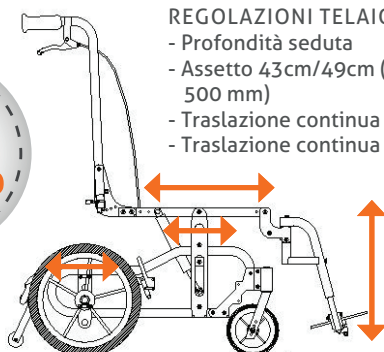

REGOLAZIONI TELAIO:

- Profondità seduta
- Assetto 43cm/49cm (con ruote da 300 mm e 500 mm)
- Traslazione continua piastra ruote posteriori
- Traslazione continua sovrastruttura

Guida Alla Scelta dell'allestimento Posturale

Intensità del sostegno posturale



Intensità del sostegno posturale



Parti Opzionabili:

(Con o senza sovrapprezzo. Pregasi consultare il modulo d'ordine)

- Ruote anteriori: 150 mm o 6" piene, 175 mm o 7" piene
- Ruote posteriori:
 - 300 mm o 12" (piene o pneumatiche, piene o pneumatiche con freno a tamburo, piene o pneumatiche con freno a tamburo + leva)
 - 400 mm o 16" (piene o piene con freno a tamburo con assetto a 45 cm)
 - 500 mm o 20" (piene o pneumatiche senza corrimano, pneumatiche con corrimano con freno a tamburo, pneumatiche con corrimano con freno a tamburo + leva)
 - 600 mm o 24" (pneumatiche con corrimano, non opzionabili su mis.US e se opzionate comportano una riduzione del basculamento a 20° con assetto a 47cm)
 - corrimano per ruote da 500 mm
- Angolo ginocchio 90°, elevabile, verticale elevabile e telescopico
- Kit manici di spinta regolabili in altezza con perno
- Kit manici di spinta telescopici con blocchetto a leva
- Kit maniglione unico regolabile in inclinazione per rigida
- Kit maniglione unico regolabile in inclinazione e telescopico
- Quick-release per la regolazione facilitata della reclinazione dello schienale
- Unità posturale per il bacino modulare Versa Inserto Seat Mediano o Domino
- Unità posturale per il tronco modulare Versa Inserto Back Effecto Lato
- Rutine antiribaltamento estraibili

Accessori:

- Bretellaggio a farfalla dinamico linea Versa Fixatis
- Tavolino linea Versa
- Poggipolpacci separati ribaltabili
- Fascia poggipolpacci imbottita
- Divaricatore estraibile
- Kit trasporto in auto (solo con ruote posteriori da 300 mm e 500 mm)
- Supporti toracici per schienale Versa Inserto Back EFFECTO LATO e SUPPORTO
- Pedalino per barriere architettoniche

Per l'elenco completo e dettagliato delle parti opzionabili e/o accessori, fare riferimento all'ultima scheda d'ordine in vigore. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.promedicare.eu

Caratteristiche Tecniche

MISURA ZEUS	PORTATA MASSIMA Misure espresse in kg	PESO TELAIO Misure espresse in kg	RAGGIO DI INVERSIONE (cm)	INGOMBRO MASSIMO IN LARGHEZZA / LUNGHEZZA Misure* espresse in cm							
				Ruote 300 Strd.	Ruote 300 Freno Tamb.	Ruote 400 Strd.	Ruote 400 Freno Tamb.	Ruote 500 Strd.	Ruote 500 Freno Tamb.	Ruote 600	
XS1	Rigido	75	19,2	75	56/100	57/100	58/100	61/100	58/106	61/106	58/112
	Chiudibile	75	19,5								
S	Rigido	75	19,5	75	59/100	60/100	61/102	64/102	61/106	64/106	61/112
	Chiudibile	75	19,9								
M	Rigido	100	19,8	78	59/103	60/103	61/104	64/104	61/109	64/109	61/116
	Chiudibile	75	20,2								
M1	Rigido	100	19,9	78	62/103	63/103	64/104	67/104	64/109	67/109	64/116
	Chiudibile	75	20,3								
L	Rigido	100	20,1	75	65/100	66/100	67/102	70/102	67/106	70/106	67/112
	Chiudibile	75	20,5								
XL	Rigido	100	20,3	78	65/103	66/103	67/104	70/104	67/109	70/109	67/116
	Chiudibile	75	20,8								

Pendenza max 7°

NB.: Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard *con angolo ginocchio in posizione 75°

Il dispositivo per essere disassemblato non necessita di utensili. Può essere trasportato in aereo o in auto. Il dispositivo può essere utilizzato come sedile in autoveicolo, opportunamente allestito con sistemi di ancoraggio per trasporto di persone diversamente abili, se dotato di apposito kit per trasporto auto.

MISURA ZEUS	INDICAZIONI UTENTE		REGOLAZIONE PROFONDITÀ TELAIO (cm)	MISURE CUSCINO (largh.x prof.) (cm)	MISURE SCHIENALE SUPPORTO (cm)				MISURE SCHIENALE EFFECTO (cm)			
	Largh. bacino (cm)	Prof. seduta (cm)			Schiendale	Altezza	Largh. effettiva scocca	Largh. tronco	Schiendale	Altezza	Largh. effettiva scocca	Larghezza tronco
XS1	REGOLABILE CON CUNEI INTERNI	35-45	da 44 a 52	40x45	3944	44	36	26-34	3945	45	39	c/staffa A 27-38 c/staffa B 22-32
S		35-45	da 44 a 52	42x45	4248	48	39	29-37	4245	45	42	c/staffa A 30-40 c/staffa B 25-35
M		40-50	da 48 a 56	42x50	4248	48	39	29-37	4250	50	42	c/staffa A 30-40 c/staffa B 25-35
M1		40-50	da 48 a 56	45x50	4550	50	42	32-40	4550	50	45	c/staffa A 33-43 c/staffa B 28-38
L		35-45	da 44 a 52	48x45	4852	52	45	35-43	4855	55	48	c/staffa A 36-46 c/staffa B 31-41
XL		40-50	da 48 a 56	48x50	4852	52	45	35-43	4855	55	48	c/staffa A 36-46 c/staffa B 31-41

Dimensione di ingombro della base Zeus con montanti (fissi) abbassati, poggiamambe e ruote posteriori disinseriti

MISURA ZEUS	PESO TELAIO (kg)	INGOMBRI MASSIMI - misure espresse in (cm)			
		Larghezza	Lunghezza	Altezza	
XS1	Rigido	12,9	51	71	67
	Chiudibile	13,3	30		
S	Rigido	13,1	54	73	67
	Chiudibile	13,6	32		
M	Rigido	13,5	54	83	68
	Chiudibile	13,9	32		
M1	Rigido	13,6	57	83	68
	Chiudibile	14	32		
L	Rigido	13,8	60	73	68
	Chiudibile	14,2	32		
XL	Rigido	14	60	83	68
	Chiudibile	14,5	32		

Prodotto e Distribuito da:



Via Montagna Z.I. Lotto 41 - 72023 Mesagne (Br) - ITALY

Tel. +39 0831 777840 - Fax. +39 0831 730739

Sito web: www.promedicare.eu - Email: info@promedicare.it

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / ISO 13485



www.promedicare.eu

Il produttore si riserva di apportare modifiche o sostituzioni senza preavviso. I contenuti, la forma, la creazione, l'ingegno, l'immagine, la strutturazione di questo catalogo, sono di proprietà della Pro Medicare srl. Ogni utilizzo improprio e non autorizzato è vietato. Ogni imitazione è esplicita e non potranno essere perseguitate.